このひと針が、生きるを繋ぐ

# Matsuda

# Suture & Needle Catalogue

経合糸・縫合針 カタログ

# **VISION**

弊社は、心臓血管領域、 外科領域をはじめとする独自の製品、 技術、サービスにより 医療従事者とパートナーが求める 医療機器・材料の絶え間ない改良に 共に取り組み、急性期治療における 専門性の高い医療をサポートします。





# **MISSION**


私たち松田医科工業株式会社は、 患者さまのためになり医師の役に立つ 製品の開発・生産・供給を通して 世界の人々の幸福に貢献します。

#### CONTENTS

未滅菌縫合針	1
滅菌済縫合針	9
滅菌済縫合糸	13
針付縫合糸	23
縫合糸の規格	34
会社概要	35

# 未滅菌縫合針

Non-sterile Surgical Needle

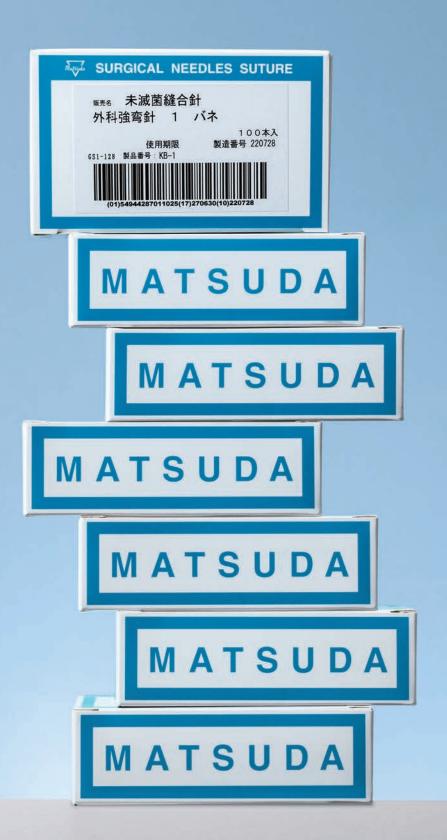

1



# 縫合針

#### Non-sterile Needle


多岐にわたる使用部位をカバーするため、縫合針もまた多様性を要しますが、 その役割は、縫合糸を的確かつスムーズに誘導させることです。 弊社では、組織刺通性に優れたより良い縫合針を第一に考えております。

#### 包装形態 | Package

## 未滅菌縫合針



1パック(10本入) 1箱[10パック入]

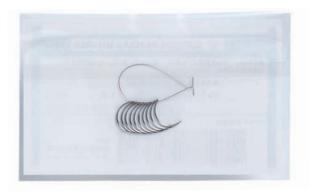


#### 先端形状の代表例 | Needle Point

# 丸針

柔らかい組織に使います。特に組織の損傷をできる だけ避けたい部位に最適です。

# 逆角針

皮膚をはじめ硬い組織に汎用されます。弯曲部内 側の組織を保護したい場合に使用します。

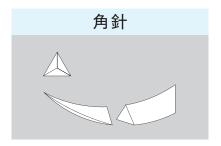

逆角針とほぼ同じ用途で使用されます。皮膚、靭帯 などの硬い組織の刺通に用います。



組織の横側を切断するのに使用します。上面が平らなので刺通外の部分まで切開する心配がありません。




基本的には柔らかい組織に使いますが、石灰化した組織や人工物との縫合に適しています。



組織を切らずに縫合糸を通す場合や、肝臓・腎臓など出血しやすい柔らかい組織の縫合に使用します。


## 弯曲の代表例 | Needle Curvature

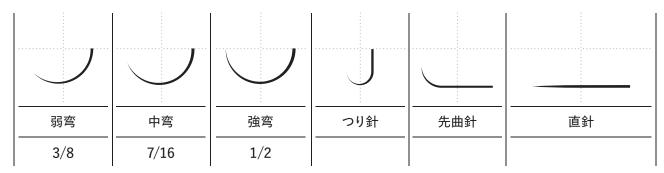


縫合針には直針と弯曲した針があります。一般的には弯曲針が多く用いられます。また弯曲した針には大きく分けると強弯と弱弯があります。

弱弯 (3/8)	主に心臓血管外科、一般外科、形成外科、眼科などの手術に用いられます。
強弯 (1/2)	主に一般外科、産婦人科、心臓血管外科の手術に用いられます。
中弯 (7/16)	主に形成外科の手術に用いられます。
直針	主に歯科、一般外科に用いられます。

#### 製品コード | Product Code

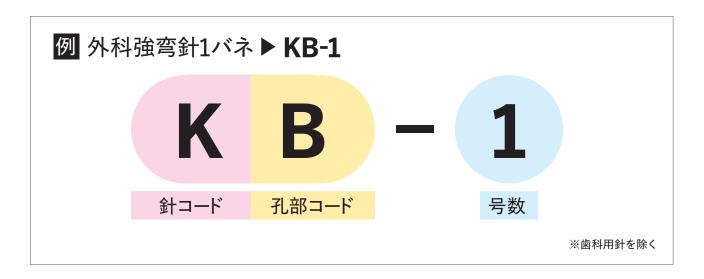


### 孔の種類による区分 | Hole Type on Needle

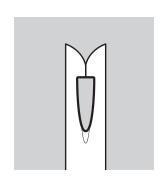

#### バネ(弾機)孔

#### 孔部コード:B

もっともよく使われている タイプです。 糸を通すのが簡単で手順 がスムーズに行われます。

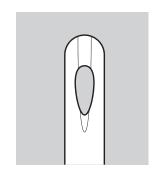


#### ナミ(普通)孔

#### 孔部コード:N

普通の裁縫針と同じように糸 先を整えて孔に糸を通す技 術を要します。糸が切れたり 抜けたりすることはなく組織 を傷つけることもありません。


## 針の種類による区分 | Needle Type \*\*画像はイメーシです。

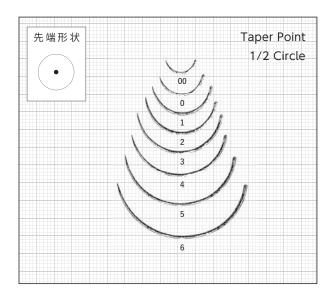

#### 腸用丸針

#### 針コード:M


号数	全長
00	15mm
0	18mm
1	23mm
2	28mm
3	33mm
4	38mm
5	43mm
6	48mm

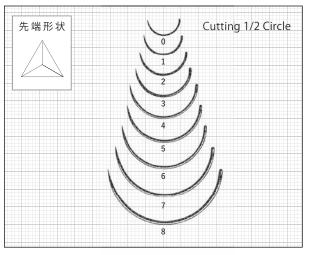

#### 外科用強弯針

#### 針コード:K


号数	全長
0	13mm
1	17mm
2	21mm
3	25mm
4	29mm
5	33mm
6	37mm
7	41mm
8	45mm

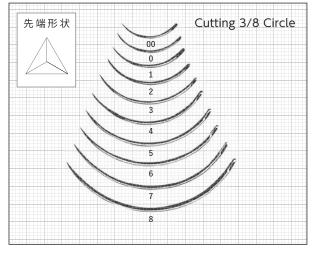

#### 外科用弱弯針

針コード: J


号数	全長
00	17mm
0	21mm
1	25mm
2	29mm
3	33mm
4	37mm
5	41mm
6	45mm
7	49mm
8	53mm

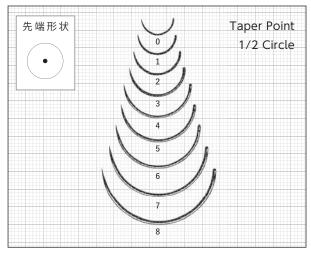

#### 外科用強弯丸針

針コード:MK


号数	全長
0	13mm
1	17mm
2	21mm
3	25mm
4	29mm
5	33mm
6	37mm
7	41mm
8	45mm

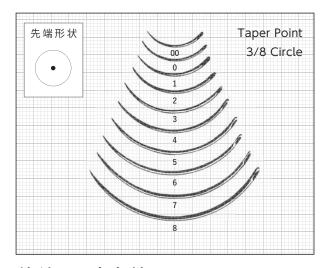

#### 外科用弱弯丸針

針コード:JM


号数	全長
00	17mm
0	21mm
1	25mm
2	29mm
3	33mm
4	37mm
5	41mm
6	45mm
7	49mm
8	53mm

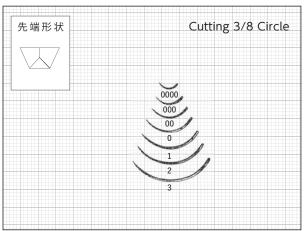

# 眼科用角針

針コード:B


号数	全長
0000	9mm
000	11mm
00	13mm
0	15mm
1	17mm
2	19mm
3	21mm

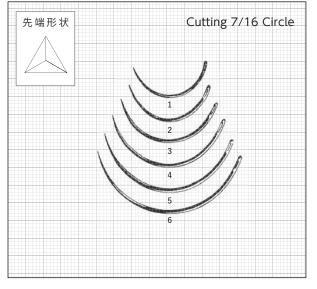

#### 婦人科用角針

針コード:GK


号数	全長
1	31mm
2	36mm
3	41mm
4	46mm
5	51mm
6	56mm

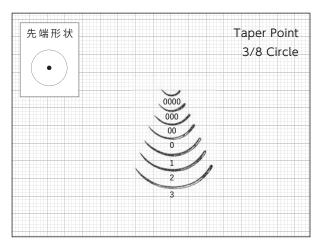

#### 眼科用丸針

針コード:BM


号数	全長
0000	9mm
000	11mm
00	13mm
0	15mm
1	17mm
2	19mm
3	21mm

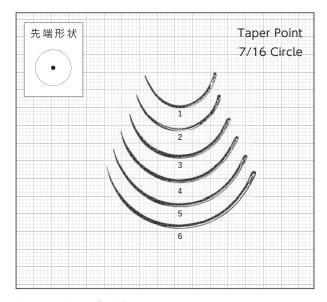


#### 婦人科用丸針

針コード:G

号数	全長
1	31mm
2	36mm
3	41mm
4	46mm
5	51mm
6	56mm

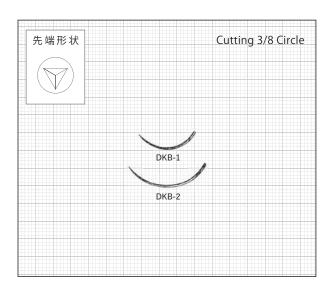

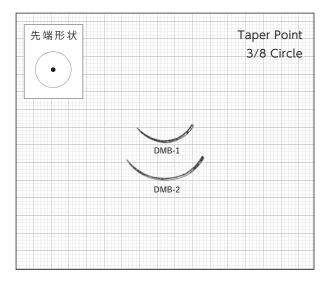



#### 歯科用角針 バネ 弱弯

製品コード	全長
DKB-1	17mm
DKB-2	20mm

歯科用丸針 バネ 弱弯

製品コード	全長
DMB-1	17mm
DMB-2	20mm

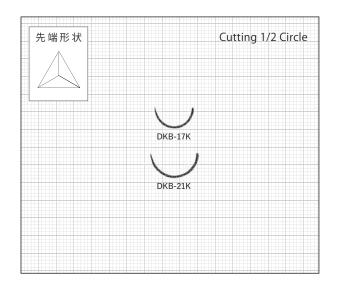

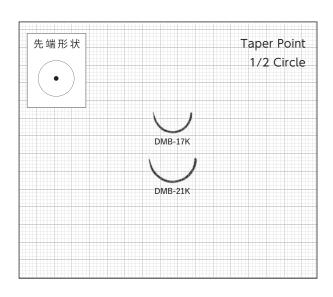


#### 歯科用角針 バネ 強弯

製品コード	全長
DKB-17K	17mm
DKB-21K	21mm

#### 歯科用丸針 バネ 強弯

製品コード	全長
DMB-17K	17mm
DMR-21K	21mm

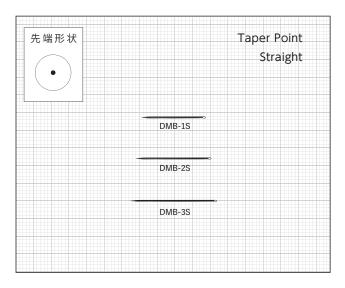

### 歯科用直針 バネ


製品コード	全長
DMB-1S	17mm
DMB-2S	20mm
DMB-3S	23mm

一般的名称: 単回使用縫合針(70417002)販売名:未滅菌縫合針医療機器承認番号: 22000BZX01674000管理医療機器·再使用禁止

# 滅菌済縫合針

Sterile Surgical Needle



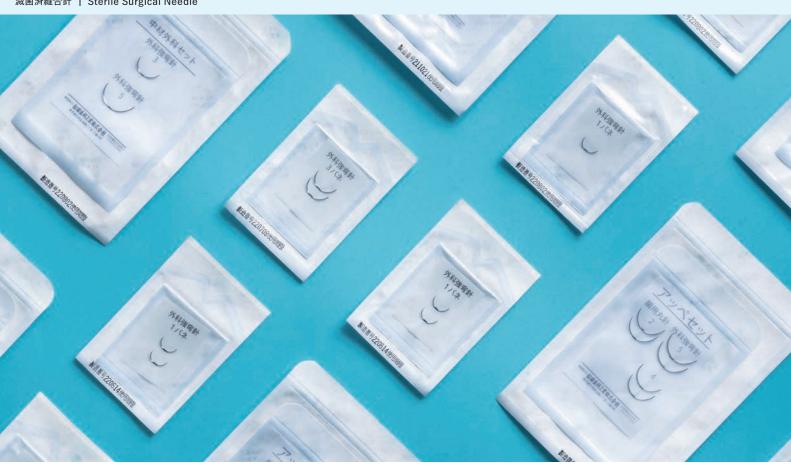

# 滅菌済縫合針

Sterile Surgical Needle

用途に応じた縫合針をエチレンオキサイドガスにて滅菌した状態でご提供をしております。 滅菌にかかる手間を省きたい、患者様へより迅速な対応がしたい そのような時にお勧めいたします。

## 包装形態 | Package

## 滅菌済縫合針

補充用 単包セット




1本差



2本差



3本差

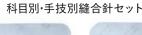



(製品例)








#### 滅菌済

#### 補充用 単包セット

Single Pack Needle for Supplementation

標準販売単位 1箱(10セット入) 1箱(50セット入) 1箱(100セット入)

製品コード | Product Code

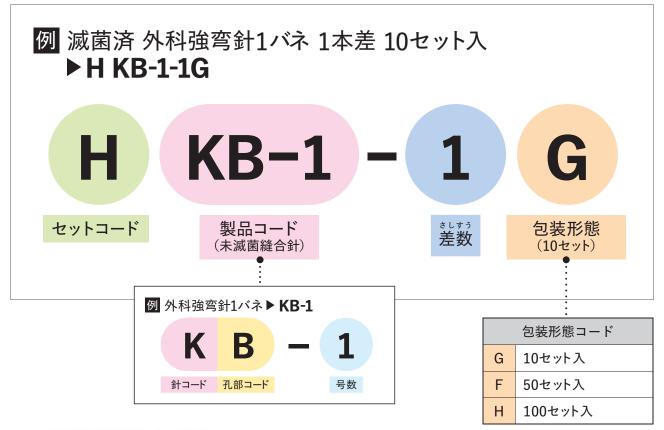





(製品例)

#### 滅菌済

科目別・手技別縫合針セット(特注品) Needle Set for Procedure

標準販売単位 1箱(50セット入) 1箱(100セット入)

病院別、手術別に製作いたします。針を組む数、順序、名称等自由にご指定頂けます。 1本~2本不足な折は補充用単包セットをご利用ください。

一般的名称:単回使用縫合針(70417002)販売名:滅菌済縫合針セット医療機器承認番号:22000BZX01676000管理医療機器・再使用禁止

# 滅菌済縫合糸

Sterile Surgical Suture





# 縫合糸

#### Sterile Surgical Suture

手術用縫合糸は、古代より木綿糸、絹糸、腸線などが使用されてきました。 その後、ナイロン、ポリエステル、合成吸収糸等、 多種多様な縫合糸が使用されるようになり現在に至ります。

## 包装形態 | Package

## 滅菌済縫合糸




1パック(10袋入)



1箱(10巻入)

#### 縫合糸の形状による区分 | Structure Type on Suture


#### モノフィラメント (単糸)

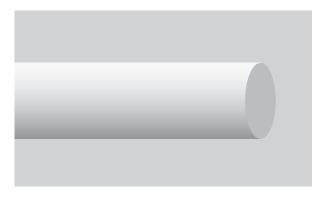

1本の繊維からできている糸

一般的に組織通過性が良い反面、結節が緩みやすい欠点があります。


#### マルチフィラメント (編糸:ブレード)

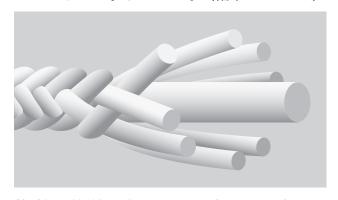

複数の繊維を編込んで1本とした糸

一般的に結紮が緩みにくく取り回しやすい反面、組織 通過性が悪い欠点があります。柔軟であることから、 太いサイズになるほど操作性が有利となるため、強度 を求められる術部の閉創に多用されます。

#### 縫合糸の素材による区分 | Suture Material

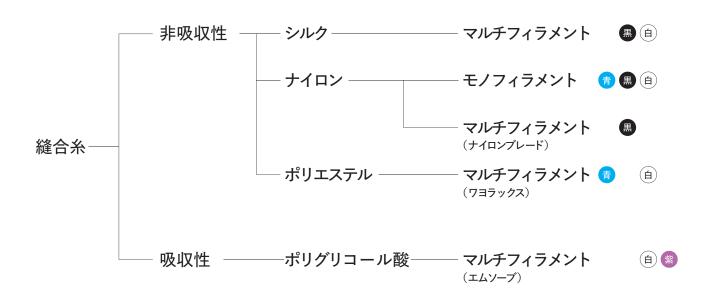

#### 製品コード | Product Code

例 滅菌済 黒ブレードシルク1-0×40cm×10本入

EOG BS 1-0 40

滅菌済

糸の 種類と色 糸の太さを 表す号数

糸の長さ(cm)

1袋の入数

※黒ナイロンブレード、ワヨラックスは『糸の種類と色』の後にスペースが入ります。

例 滅菌済 黒ブレードシルク1-0 10m 10巻入

EOG BS 1-0 10M

滅菌済

糸の 種類と色 糸の太さを 表す号数

糸の長さ(m)

※黒ナイロンブレード、ワヨラックスは『糸の種類と色』の後にスペースが入ります。

縫合糸の種類と記号				
種類	記号	種類	記号	
白ブレードシルク	WS	黒ナイロンブレード	N2	
黒ブレードシルク	BS	黒ナイロン	N	
ワヨラックス青	W1	青ナイロン	BN	
ワヨラックス白	W3	白ナイロン	WN	

# 滅菌済縫合糸製品コード | Product code by suture type

## 絹糸 | SILK

Braided Silk Suture

	滅菌済 白ブレードシルク					
長さ(cm)	入数(本数)	6-0	5-0	4-0	3-0	
35	5	EOG WS6-0 35 5	EOG WS5-0 35 5	EOG WS4-0 35 5	EOG WS3-0 35 5	
35	10	EOG WS6-0 35 10	EOG WS5-0 35 10	EOG WS4-0 35 10	EOG WS3-0 35 10	
40	5	EOG WS6-0 40 5	EOG WS5-0 40 5	EOG WS4-0 40 5	EOG WS3-0 40 5	
40	10	EOG WS6-0 40 10	EOG WS5-0 40 10	EOG WS4-0 40 10	EOG WS3-0 40 10	
50	5	EOG WS6-0 50 5	EOG WS5-0 50 5	EOG WS4-0 50 5	EOG WS3-0 50 5	
50	10	EOG WS6-0 50 10	EOG WS5-0 50 10	EOG WS4-0 50 10	EOG WS3-0 50 10	
60	5	EOG WS6-0 60 5	EOG WS5-0 60 5	EOG WS4-0 60 5	EOG WS3-0 60 5	
60	10	EOG WS6-0 60 10	EOG WS5-0 60 10	EOG WS4-0 60 10	EOG WS3-0 60 10	
70	5	EOG WS6-0 70 5	EOG WS5-0 70 5	EOG WS4-0 70 5	EOG WS3-0 70 5	
70	10	EOG WS6-0 70 10	EOG WS5-0 70 10	EOG WS4-0 70 10	EOG WS3-0 70 10	

長さ(cm)	入数(本数)	2-0	1-0	1	2
35	5	EOG WS2-0 35 5	EOG WS1-0 35 5	EOG WS1 35 5	EOG WS2 35 5
35	10	EOG WS2-0 35 10	EOG WS1-0 35 10	EOG WS1 35 10	EOG WS2 35 10
40	5	EOG WS2-0 40 5	EOG WS1-0 40 5	EOG WS1 40 5	EOG WS2 40 5
40	10	EOG WS2-0 40 10	EOG WS1-0 40 10	EOG WS1 40 10	EOG WS2 40 10
50	5	EOG WS2-0 50 5	EOG WS1-0 50 5	EOG WS1 50 5	EOG WS2 50 5
50	10	EOG WS2-0 50 10	EOG WS1-0 50 10	EOG WS1 50 10	EOG WS2 50 10
60	5	EOG WS2-0 60 5	EOG WS1-0 60 5	EOG WS1 60 5	EOG WS2 60 5
60	10	EOG WS2-0 60 10	EOG WS1-0 60 10	EOG WS1 60 10	EOG WS2 60 10
70	5	EOG WS2-0 70 5	EOG WS1-0 70 5	EOG WS1 70 5	EOG WS2 70 5
70	10	EOG WS2-0 70 10	EOG WS1-0 70 10	EOG WS1 70 10	EOG WS2 70 10

長さ(cm)	入数(本数)	3
35	5	EOG WS3 35 5
35	10	EOG WS3 35 10
40	5	EOG WS3 40 5
40	10	EOG WS3 40 10
50	5	EOG WS3 50 5
50	10	EOG WS3 50 10
60	5	EOG WS3 60 5
60	10	EOG WS3 60 10
70	5	EOG WS3 70 5
70	10	EOG WS3 70 10

最少出荷単位 1パック(10袋) 1箱[10袋×5パック入]

	滅菌済 黒ブレードシルク						
長さ(cm)	入数(本数)	6-0	5-0	4-0	3-0		
35	5	EOG BS6-0 35 5	EOG BS5-0 35 5	EOG BS4-0 35 5	EOG BS3-0 35 5		
35	10	EOG BS6-0 35 10	EOG BS5-0 35 10	EOG BS4-0 35 10	EOG BS3-0 35 10		
40	5	EOG BS6-0 40 5	EOG BS5-0 40 5	EOG BS4-0 40 5	EOG BS3-0 40 5		
40	10	EOG BS6-0 40 10	EOG BS5-0 40 10	EOG BS4-0 40 10	EOG BS3-0 40 10		
50	5	EOG BS6-0 50 5	EOG BS5-0 50 5	EOG BS4-0 50 5	EOG BS3-0 50 5		
50	10	EOG BS6-0 50 10	EOG BS5-0 50 10	EOG BS4-0 50 10	EOG BS3-0 50 10		
60	5	EOG BS6-0 60 5	EOG BS5-0 60 5	EOG BS4-0 60 5	EOG BS3-0 60 5		
60	10	EOG BS6-0 60 10	EOG BS5-0 60 10	EOG BS4-0 60 10	EOG BS3-0 60 10		

長さ(cm)	入数(本数)	2-0	1-0	1	2
35	5	EOG BS2-0 35 5	EOG BS1-0 35 5	EOG BS1 35 5	EOG BS2 35 5
35	10	EOG BS2-0 35 10	EOG BS1-0 35 10	EOG BS1 35 10	EOG BS2 35 10
40	5	EOG BS2-0 40 5	EOG BS1-0 40 5	EOG BS1 40 5	EOG BS2 40 5
40	10	EOG BS2-0 40 10	EOG BS1-0 40 10	EOG BS1 40 10	EOG BS2 40 10
50	5	EOG BS2-0 50 5	EOG BS1-0 50 5	EOG BS1 50 5	EOG BS2 50 5
50	10	EOG BS2-0 50 10	EOG BS1-0 50 10	EOG BS1 50 10	EOG BS2 50 10
60	5	EOG BS2-0 60 5	EOG BS1-0 60 5	EOG BS1 60 5	EOG BS2 60 5
60	10	EOG BS2-0 60 10	EOG BS1-0 60 10	EOG BS1 60 10	EOG BS2 60 10

最少出荷単位

1パック(10袋)

1箱 [10袋×5パック入]

1箱 [10袋×10パック入]

# ナイロン糸 | NYLON

#### Monofilament Polyamide Suture

	滅菌済 青ナイロン						
長さ(cm)	入数(本数)	6-0	5-0	4-0	3-0		
35	5		EOG BN5-0 35 5	EOG BN4-0 35 5	EOG BN3-0 35 5		
35	10		EOG BN5-0 35 10	EOG BN4-0 35 10	EOG BN3-0 35 10		
40	5		EOG BN5-0 40 5	EOG BN4-0 40 5	EOG BN3-0 40 5		
40	10		EOG BN5-0 40 10	EOG BN4-0 40 10	EOG BN3-0 40 10		
50	5		EOG BN5-0 50 5	EOG BN4-0 50 5	EOG BN3-0 50 5		
50	10		EOG BN5-0 50 10	EOG BN4-0 50 10	EOG BN3-0 50 10		
60	5	_	EOG BN5-0 60 5	EOG BN4-0 60 5	EOG BN3-0 60 5		
60	10	_	EOG BN5-0 60 10	EOG BN4-0 60 10	EOG BN3-0 60 10		

長さ(cm)	入数(本数)	2-0	1-0	1	2
35	5	EOG BN2-0 35 5	EOG BN1-0 35 5	EOG BN1 35 5	EOG BN2 35 5
35	10	EOG BN2-0 35 10	EOG BN1-0 35 10	EOG BN1 35 10	EOG BN2 35 10
40	5	EOG BN2-0 40 5	EOG BN1-0 40 5	EOG BN1 40 5	EOG BN2 40 5
40	10	EOG BN2-0 40 10	EOG BN1-0 40 10	EOG BN1 40 10	EOG BN2 40 10
50	5	EOG BN2-0 50 5	EOG BN1-0 50 5	EOG BN1 50 5	EOG BN2 50 5
50	10	EOG BN2-0 50 10	EOG BN1-0 50 10	EOG BN1 50 10	EOG BN2 50 10
60	5	EOG BN2-0 60 5	EOG BN1-0 60 5	EOG BN1 60 5	EOG BN2 60 5
60	10	EOG BN2-0 60 10	EOG BN1-0 60 10	EOG BN1 60 10	EOG BN2 60 10

	滅菌済 黒ナイロン						
長さ(cm)	長さ(cm) 入数(本数) 5-0 4-0 3-0 2-0						
35	5	EOG N5-0 35 5	EOG N4-0 35 5	EOG N3-0 35 5	EOG N2-0 35 5		
35	10	EOG N5-0 35 10	EOG N4-0 35 10	EOG N3-0 35 10	EOG N2-0 35 10		
40	5	EOG N5-0 40 5	EOG N4-0 40 5	EOG N3-0 40 5	EOG N2-0 40 5		
40	10	EOG N5-0 40 10	EOG N4-0 40 10	EOG N3-0 40 10	EOG N2-0 40 10		

長さ(cm)	入数(本数)	1-0	1	2	3
35	5	EOG N1-0 35 5	EOG N1 35 5	EOG N2 35 5	
35	10	EOG N1-0 35 10	EOG N1 35 10	EOG N2 35 10	
40	5	EOG N1-0 40 5	EOG N1 40 5	EOG N2 40 5	
40	10	EOG N1-0 40 10	EOG N1 40 10	EOG N2 40 10	

滅菌済 白ナイロン						
長さ(cm)	入数(本数)	5-0	4-0	3-0	2-0	
35	5	EOG WN5-0 35 5	EOG WN4-0 35 5	EOG WN3-0 35 5	EOG WN2-0 35 5	
35	10	EOG WN5-0 35 10	EOG WN4-0 35 10	EOG WN3-0 35 10	EOG WN2-0 35 10	
40	5	EOG WN5-0 40 5	EOG WN4-0 40 5	EOG WN3-0 40 5	EOG WN2-0 40 5	
40	10	EOG WN5-0 40 10	EOG WN4-0 40 10	EOG WN3-0 40 10	EOG WN2-0 40 10	

最少出荷単位			
1パック(10袋)			
1箱 [10袋×5パック入]			

# ナイロンブレード糸 | NYLON BRAIDED

#### Braided Polyamide Suture

	滅菌済 黒ナイロンブレード							
長さ(cm)	入数(本数)	5-0	4-0	3-0	2-0			
35	5	EOG N2 5-0 35 5	EOG N2 4-0 35 5	EOG N2 3-0 35 5	EOG N2 2-0 35 5			
35	10	EOG N2 5-0 35 10	EOG N2 4-0 35 10	EOG N2 3-0 35 10	EOG N2 2-0 35 10			
40	5	EOG N2 5-0 40 5	EOG N2 4-0 40 5	EOG N2 3-0 40 5	EOG N2 2-0 40 5			
40	10	EOG N2 5-0 40 10	EOG N2 4-0 40 10	EOG N2 3-0 40 10	EOG N2 2-0 40 10			
50	5	EOG N2 5-0 50 5	EOG N2 4-0 50 5	EOG N2 3-0 50 5	EOG N2 2-0 50 5			
50	10	EOG N2 5-0 50 10	EOG N2 4-0 50 10	EOG N2 3-0 50 10	EOG N2 2-0 50 10			
60	5	EOG N2 5-0 60 5	EOG N2 4-0 60 5	EOG N2 3-0 60 5	EOG N2 2-0 60 5			
60	10	EOG N2 5-0 60 10	EOG N2 4-0 60 10	EOG N2 3-0 60 10	EOG N2 2-0 60 10			

長さ(cm)	入数(本数)	1-0	1	2
35	5	EOG N2 1-0 35 5	EOG N2 1 35 5	EOG N2 2 35 5
35	10	EOG N2 1-0 35 10	EOG N2 1 35 10	EOG N2 2 35 10
40	5	EOG N2 1-0 40 5	EOG N2 1 40 5	EOG N2 2 40 5
40	10	EOG N2 1-0 40 10	EOG N2 1 40 10	EOG N2 2 40 10
50	5	EOG N2 1-0 50 5	EOG N2 1 50 5	EOG N2 2 50 5
50	10	EOG N2 1-0 50 10	EOG N2 1 50 10	EOG N2 2 50 10
60	5	EOG N2 1-0 60 5	EOG N2 1 60 5	EOG N2 2 60 5
60	10	EOG N2 1-0 60 10	EOG N2 1 60 10	EOG N2 2 60 10

最少出荷単位

1パック(10袋)

1箱 [10袋×5パック入]

# ワヨラックス® | WAYOLAX

#### Braided Polyester Suture

	滅菌済 ワヨラックス青						
長さ(cm)	入数(本数)	4-0	3-0	2-0	1-0		
40	5	EOG W1 4-0 40 5	EOG W1 3-0 40 5	EOG W1 2-0 40 5	EOG W1 1-0 40 5		
40	10	EOG W1 4-0 40 10	EOG W1 3-0 40 10	EOG W1 2-0 40 10	EOG W1 1-0 40 10		
50	5	EOG W1 4-0 50 5	EOG W1 3-0 50 5	EOG W1 2-0 50 5	EOG W1 1-0 50 5		
50	10	EOG W1 4-0 50 10	EOG W1 3-0 50 10	EOG W1 2-0 50 10	EOG W1 1-0 50 10		
60	5	EOG W1 4-0 60 5	EOG W1 3-0 60 5	EOG W1 2-0 60 5	EOG W1 1-0 60 5		
60	10	EOG W1 4-0 60 10	EOG W1 3-0 60 10	EOG W1 2-0 60 10	EOG W1 1-0 60 10		
70	5	EOG W1 4-0 70 5	EOG W1 3-0 70 5	EOG W1 2-0 70 5	EOG W1 1-0 70 5		
70	10	EOG W1 4-0 70 10	EOG W1 3-0 70 10	EOG W1 2-0 70 10	EOG W1 1-0 70 10		
80	5	EOG W1 4-0 80 5	EOG W1 3-0 80 5	EOG W1 2-0 80 5	EOG W1 1-0 80 5		
80	10	EOG W1 4-0 80 10	EOG W1 3-0 80 10	EOG W1 2-0 80 10	EOG W1 1-0 80 10		

長さ(cm)	入数(本数)	1	2	3
40	5	EOG W1 1 40 5	EOG W1 2 40 5	EOG W1 3 40 5
40	10	EOG W1 1 40 10	EOG W1 2 40 10	EOG W1 3 40 10
50	5	EOG W1 1 50 5	EOG W1 2 50 5	EOG W1 3 50 5
50	10	EOG W1 1 50 10	EOG W1 2 50 10	EOG W1 3 50 10
60	5	EOG W1 1 60 5	EOG W1 2 60 5	EOG W1 3 60 5
60	10	EOG W1 1 60 10	EOG W1 2 60 10	EOG W1 3 60 10
70	5	EOG W1 1 70 5	EOG W1 2 70 5	EOG W1 3 70 5
70	10	EOG W1 1 70 10	EOG W1 2 70 10	EOG W1 3 70 10
80	5	EOG W1 1 80 5	EOG W1 2 80 5	EOG W1 3 80 5
80	10	EOG W1 1 80 10	EOG W1 2 80 10	EOG W1 3 80 10

	滅菌済 ワヨラックス白						
長さ(cm)	入数(本数)	3-0	2-0	1-0			
40	5	EOG W3 3-0 40 5	EOG W3 2-0 40 5	EOG W3 1-0 40 5			
40	10	EOG W3 3-0 40 10	EOG W3 2-0 40 10	EOG W3 1-0 40 10			
50	5	EOG W3 3-0 50 5	EOG W3 2-0 50 5	EOG W3 1-0 50 5			
50	10	EOG W3 3-0 50 10	EOG W3 2-0 50 10	EOG W3 1-0 50 10			
60	5	EOG W3 3-0 60 5	EOG W3 2-0 60 5	EOG W3 1-0 60 5			
60	10	EOG W3 3-0 60 10	EOG W3 2-0 60 10	EOG W3 1-0 60 10			
70	5	EOG W3 3-0 70 5	EOG W3 2-0 70 5	EOG W3 1-0 70 5			
70	10	EOG W3 3-0 70 10	EOG W3 2-0 70 10	EOG W3 1-0 70 10			
80	5	EOG W3 3-0 80 5	EOG W3 2-0 80 5	EOG W3 1-0 80 5			
80	10	EOG W3 3-0 80 10	EOG W3 2-0 80 10	EOG W3 1-0 80 10			

長さ(cm)	入数(本数)	1	2	3
40	5	EOG W3 1 40 5	EOG W3 2 40 5	EOG W3 3 40 5
40	10	EOG W3 1 40 10	EOG W3 2 40 10	EOG W3 3 40 10
50	5	EOG W3 1 50 5	EOG W3 2 50 5	EOG W3 3 50 5
50	10	EOG W3 1 50 10	EOG W3 2 50 10	EOG W3 3 50 10
60	5	EOG W3 1 60 5	EOG W3 2 60 5	EOG W3 3 60 5
60	10	EOG W3 1 60 10	EOG W3 2 60 10	EOG W3 3 60 10
70	5	EOG W3 1 70 5	EOG W3 2 70 5	EOG W3 3 70 5
70	10	EOG W3 1 70 10	EOG W3 2 70 10	EOG W3 3 70 10
80	5	EOG W3 1 80 5	EOG W3 2 80 5	EOG W3 3 80 5
80	10	EOG W3 1 80 10	EOG W3 2 80 10	EOG W3 3 80 10

最少出荷単位 1箱 [10袋×5パック入]

## エムソープ® | M-SORB

#### Braided Polyglycolic Acid Suture

PGA(ポリグリコール酸)を原料とし、生体内で加水分解し、2週間で強度が半減、約15週間で分解吸収されます。

	滅菌済 エムソーブ紫							
長さ(cm)	入数(本数)	3-0	2-0	1-0	1	2		
45	45 3 IM30V453 IM20V453							
150	1	IM30V150	IM20V150	IM10V150	IM1V150	IM2V150		

	滅菌済 エムソーブ白					
長さ(cm)	入数(本数)	3-0		2-0	1-0	
150	1	IM30W150		IM20W150	IM10W150	

最少出荷単位 1箱 (12袋入)

一般的名称:滅菌済み絹製縫合糸(13910000)販売名:滅菌済医療用絹製(ブレード)縫合糸医療機器承認番号:20200BZZ00021000

高度管理医療機器•再使用禁止

同及自生区凉城部 行风用亲正

一 般 的 名 称:ポリアミド縫合糸(38847000)

販 売 名:滅菌済ナイロン

医療機器承認番号:20200BZZ01362000

高度管理医療機器·再使用禁止

一般的名称:ポリアミド縫合糸(38847000)

販 売 名:滅菌済ナイロンブレード

医療機器承認番号:20200BZZ01363000

高度管理医療機器·再使用禁止

一 般 的 名 称:ポリエステル縫合糸(13906000)

販売名:滅菌済ワヨラックス 医療機器承認番号:20200BZZ00740000

高度管理医療機器・再使用禁止

一般的名称:ポリグリコール酸縫合糸(13908000)

販 売 名:エムソーブ

医療機器承認番号:20700BZZ00566000

高度管理医療機器·再使用禁止

# 針付縫合糸

Surgical Suture with Needle













# 針付縫合糸

Suture with Needle

肝要なのは縫合針と縫合糸の接合部です。


適切な接合が出来ていない針付縫合糸では縫合部位で出血させる可能性があります。 弊社では、可能な限り接合部の段差が少ないものを標準タイプとしています。

包装形態 | Package

## 針付縫合糸



#### 弯曲針の代表例 | Needle Curvature

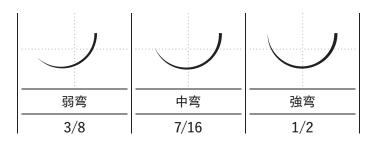


縫合針には直針と弯曲針があります。 一般的には弯曲針が用いられ、 大きく分けると弱弯と強弯があります。

弱弯(3/8) 主に心臓血管外科、一般外科、形成外科、眼科などの手術に用いられます。

強弯(1/2) 主に一般外科、産婦人科、心臓血管外科の手術に用いられます。

中弯(7/16) 主に形成外科の手術に用いられます。


#### 先端形状の代表例 | Needle Point

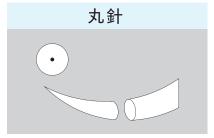

柔らかい組織に使用します。特に組織の損傷をできるだけ避けたい部位に最適です。

# 逆角針


皮膚をはじめ硬い組織に使用します。弯曲部内側 の組織を保護したい場合に使用します。

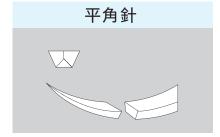

組織の横側を切断するのに使用します。上面が平らなので刺通外の部分まで切開する心配がありません。

### 縫合糸の形状による区分 | Structure Type on Suture


#### モノフィラメント (単糸)

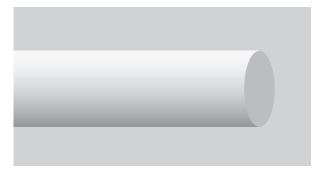

#### 1本の繊維からできている糸

一般的に組織通過性が良い反面、結節が緩みやすい欠点があります。


#### マルチフィラメント (編糸:ブレード)

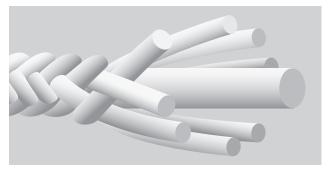

#### 複数の繊維を編込んで1本とした糸

一般的に結紮が緩みにくく取り回しやすい反面、組織 通過性が悪い欠点があります。柔軟であることから、 太いサイズになるほど操作性が有利となるため、強度 を求められる術部の閉創に多用されます。

#### 縫合糸の素材による区分 | Suture Material

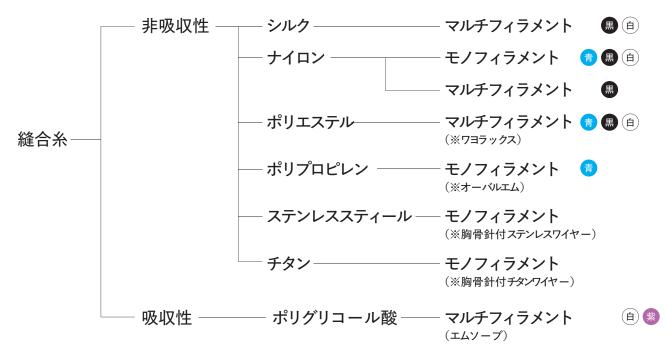

※心臓外科向けカタログ参照

#### 製品コード | Product Code





# 針付縫合糸製品コード | Product Code by Suture with Needle type

角針弱弯									
針コード・長さ	糸の色と種類	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	糸長さ	
쯔 OP11 11mm	黒ナイロン	OP11 7-0N	OP11 6-0N	OP11 5-0N					
	青ナイロン	OP11 7-0BN	OP11 6-0BN	OP11 5-0BN					
	白ナイロン		OP11 6-0WN						
	黒ブレードシルク		OP11 6-0BS						
☑ OP13 13mm	黒ナイロン		OP13 6-0N	OP13 5-0N	OP13 4-0N				
	青ナイロン		OP13 6-0BN	OP13 5-0BN	OP13 4-0BN				
	白ナイロン			OP13 5-0WN					
	黒ブレードシルク			OP13 5-0BS					
☑ OP15 15mm	黒ナイロン			OP15 5-0N	OP15 4-0N				
	青ナイロン			OP15 5-0BN	OP15 4-0BN			50cm	
	白ナイロン			OP15 5-0WN	OP15 4-0WN			500111	
	黒ブレードシルク			OP15 5-0BS	OP15 4-0BS				
쯔 OP17 17mm	黒ナイロン			OP17 5-0N	OP17 4-0N	OP17 3-0N			
	青ナイロン			OP17 5-0BN	OP17 4-0BN	OP17 3-0BN			
	白ナイロン				OP17 4-0WN				
	黒ブレードシルク				OP17 4-0BS				
☑ OP19 19mm	黒ナイロン				OP19 4-0N	OP19 3-0N			
,	青ナイロン				OP19 4-0BN	OP19 3-0BN			
	白ナイロン					OP19 3-0WN			
	黒ブレードシルク					OP19 3-0BS			
₩ K21 21mm	黒ナイロン					K21 3-0N			
	青ナイロン					K21 3-0BN			
	黒ブレードシルク					K21 3-0BS			
₩ K25 25mm	黒ナイロン					K25 3-0N			
	青ナイロン					K25 3-0BN		75cm	
	黒ブレードシルク					K25 3-0BS			
₩ K29 29mm	黒ナイロン						K29 2-0N		
	青ナイロン						K29 2-0BN		
	黒ブレードシルク						K29 2-0BS		

入数	1箱(10本入)
----	----------

				角針強弯	:				
針コード・長さ	糸の色と種類	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	糸長さ
₩ OP61 11mm	黒ナイロン	OP61 7-0N	OP61 6-0N	OP61 5-0N					
	青ナイロン	OP61 7-0BN	OP61 6-0BN	OP61 5-0BN					
	白ナイロン		OP61 6-0WN						
	黒ブレードシルク		OP61 6-0BS						
	白ブレードシルク		OP61 6-0WS						
☑ OP63 13mm	黒ナイロン		OP63 6-0N	OP63 5-0N	OP63 4-0N				
	青ナイロン		OP63 6-0BN	OP63 5-0BN	OP63 4-0BN				
	白ナイロン			OP63 5-0WN					
	黒ブレードシルク			OP63 5-0BS					
	白ブレードシルク			OP63 5-0WS					
☑ OP65 15mm	黒ナイロン		OP65 6-0N	OP65 5-0N	OP65 4-0N	OP65 3-0N			
	青ナイロン		OP65 6-0BN	OP65 5-0BN	OP65 4-0BN	OP65 3-0BN			
	白ナイロン			OP65 5-0WN	OP65 4-0WN				50cm
	黒ブレードシルク			OP65 5-0BS	OP65 4-0BS				
	白ブレードシルク			OP65 5-0WS	OP65 4-0WS				
₩ OP67 17mm	黒ナイロン		OP67 6-0N	OP67 5-0N	OP67 4-0N	OP67 3-0N			
	青ナイロン		OP67 6-0BN	OP67 5-0BN	OP67 4-0BN	OP67 3-0BN			
	白ナイロン				OP67 4-0WN				
	黒ブレードシルク				OP67 4-0BS				
	白ブレードシルク				OP67 4-0WS				
₩ OP69 19mm	黒ナイロン			OP69 5-0N	OP69 4-0N	OP69 3-0N			
	青ナイロン			OP69 5-0BN	OP69 4-0BN	OP69 3-0BN			
	白ナイロン					OP69 3-0WN			
	黒ブレードシルク					OP69 3-0BS			
	白ブレードシルク					OP69 3-0WS			
<b>▼</b> K71 21mm	黒ナイロン			K71 5-0N	K71 4-0N	K71 3-0N	K71 2-0N		
	青ナイロン			K71 5-0BN	K71 4-0BN	K71 3-0BN	K71 2-0BN		
\ /	白ナイロン					K71 3-0WN			
	黒ブレードシルク					K71 3-0BS			
	白ブレードシルク					K71 3-0WS			
<b>▼</b> K75 25mm	黒ナイロン				K75 4-0N	K75 3-0N	K75 2-0N		
	青ナイロン				K75 4-0BN	K75 3-0BN	K75 2-0BN		
	白ナイロン					K75 3-0WN			75cm
	黒ブレードシルク					K75 3-0BS	K75 2-0BS		
	白ブレードシルク					K75 3-0WS	K75 2-0WS		
<b>▼</b> K79 29mm	黒ナイロン					K79 3-0N	K79 2-0N		
	青ナイロン					K79 3-0BN	K79 2-0BN		
\	白ナイロン						K79 2-0WN		
	黒ブレードシルク						K79 2-0BS	K79 1-0BS	
	白ブレードシルク						K79 2-0WS	K79 1-0WS	

角針中弯									
針型・長さ	糸の色と種類	6-0	5-0	4-0	3-0	糸長さ			
<b>▼</b> KK13 13mm	黒ナイロン	KK13 6-0N	KK13 5-0N	KK13 4-0N	KK13 3-0N				
	青ナイロン	KK13 6-0BN	KK13 5-0BN	KK13 4-0BN	KK13 3-0BN				
	白ナイロン		KK13 5-0WN	KK13 4-0WN		50cm			
<b>▼</b> KK15 15mm	黒ナイロン		KK15 5-0N	KK15 4-0N	KK15 3-0N	SUCIII			
	青ナイロン		KK15 5-0BN	KK15 4-0BN	KK15 3-0BN				
	白ナイロン		KK15 5-0WN	KK15 4-0WN					

			特殊針中	弯			
針コード・長さ	糸の色と種類	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	糸長さ
☑ MM11 11mm	黒ナイロン	MM11 7-0N	MM11 6-0N	MM11 5-0N	MM11 4-0N		
	青ナイロン	MM11 7-0BN	MM11 6-0BN	MM11 5-0BN	MM11 4-0BN		
	白ナイロン			MM11 5-0WN	MM11 4-0WN		
₩ MM13 13mm	黒ナイロン		MM13 6-0N	MM13 5-0N	MM13 4-0N	MM13 3-0N	Ī
	青ナイロン		MM13 6-0BN	MM13 5-0BN	MM13 4-0BN	MM13 3-0BN	
	白ナイロン			MM13 5-0WN	MM13 4-0WN		
₩ MM15 15mm	黒ナイロン		MM15 6-0N	MM15 5-0N	MM15 4-0N	MM15 3-0N	Ī
	青ナイロン		MM15 6-0BN	MM15 5-0BN	MM15 4-0BN	MM15 3-0BN	
	白ナイロン				MM15 4-0WN		
₩ MM18 18mm	黒ナイロン			MM18 5-0N	MM18 4-0N	MM18 3-0N	Ī
	青ナイロン			MM18 5-0BN	MM18 4-0BN	MM18 3-0BN	50cm
	白ナイロン				MM18 4-0WN		
₩ MM20 20mm	黒ナイロン			MM20 5-0N	MM20 4-0N	MM20 3-0N	Ī
	青ナイロン			MM20 5-0BN	MM20 4-0BN	MM20 3-0BN	
	白ナイロン				MM20 4-0WN		
₩ MM22 22mm	黒ナイロン				MM22 4-0N	MM22 3-0N	1
	青ナイロン					MM22 3-0BN	
	白ナイロン					MM22 3-0WN	
₩ MM25 25mm	黒ナイロン				MM25 4-0N	MM25 3-0N	Ţ
	青ナイロン					MM25 3-0BN	
	白ナイロン					MM25 3-0WN	

			丸針弱弯				
針コード・長さ	糸の色と種類	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	糸長さ
	黒ナイロン	M8 7-0N	M8 6-0N				
	青ナイロン	M8 7-0BN	M8 6-0BN				
	白ナイロン	M8 7-0WN	M8 6-0WN				F0
⊙ M10 10mm	黒ナイロン		M10 6-0N				50cm
	青ナイロン		M10 6-0BN				
	白ナイロン		M10 6-0WN				
⊙ M12 12mm	黒ナイロン			M12 5-0N			
	青ナイロン			M12 5-0BN			
	白ナイロン			M12 5-0WN			
<b>⊙</b> M14 14mm	黒ナイロン				M14 4-0N		]
	白ナイロン				M14 4-0WN		
	青ナイロン				M14 4-0BN		
	黒ブレードシルク				M14 4-0BS		
⊙ M17 17mm	黒ナイロン				M17 4-0N		
	白ナイロン				M17 4-0WN		
	青ナイロン				M17 4-0BN		75cm
	黒ブレードシルク				M17 4-0BS		
● M20 20mm	黒ナイロン					M20 3-0N	]
	白ナイロン					M20 3-0WN	
	青ナイロン					M20 3-0BN	
	黒ブレードシルク					M20 3-0BS	
	黒ナイロン					M23 3-0N	
	白ナイロン					M23 3-0WN	
	青ナイロン					M23 3-0BN	
	黒ブレードシルク					M23 3-0BS	1

入数   1箱	(10本入)
---------	--------

			丸針強弯				
針コード・長さ	糸の色と種類	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	糸長さ
● M61 11mm	黒ナイロン	M61 6-0N					
	青ナイロン	M61 6-0BN					50cm
$\bigcup$	白ナイロン	M61 6-0WN					SUCIII
	黒ブレードシルク	M61 6-0BS					
● M63 13mm	黒ナイロン		M63 5-0N				
	青ナイロン		M63 5-0BN				
	白ナイロン		M63 5-0WN				
	黒ブレードシルク		M63 5-0BS				
● M65 15mm	黒ナイロン		M65 5-0N	M65 4-0N			
	青ナイロン			M65 4-0BN			
	黒ブレードシルク			M65 4-0BS			
● M68A 18mm	黒ナイロン			M68A 4-0N	M68A 3-0N		
	青ナイロン				M68A 3-0BN		
	黒ブレードシルク				M68A 3-0BS		75cm
○ M71 21mm	黒ナイロン				M71 3-0N		
	黒ブレードシルク				M71 3-0BS		
M73A 23mm	黒ナイロン				M73A 3-0N		
	黒ブレードシルク				M73A 3-0BS		
○ M78A 28mm	黒ナイロン					M78A 2-0N	
	黒ブレードシルク					M78A 2-0BS	

入数 1箱(10本入)

	歯科用針									
針コード・長さ	糸の色と種類	5-0	4-0	3-0	糸長さ					
① DH14 弱弯 14mm	黒ナイロン	DH14 5-0N	DH14 4-0N							
	黒ブレードシルク	DH14 5-0BS	DH14 4-0BS							
	黒ナイロンブレード	DH14 5-0N2	DH14 4-0N2							
<b>○</b> DH17 弱弯 17mm	黒ナイロン		DH17 4-0N	DH17 3-0N						
	黒ブレードシルク		DH17 4-0BS	DH17 3-0BS						
	黒ナイロンブレード		DH17 4-0N2	DH17 3-0N2	50cm					
OH65 強弯 15mm	黒ナイロン	DH65 5-0N	DH65 4-0N		SUCIII					
	黒ブレードシルク	DH65 5-0BS	DH65 4-0BS							
	黒ナイロンブレード	DH65 5-0N2	DH65 4-0N2							
OH68 強弯 18mm	黒ナイロン		DH68 4-0N	DH68 3-0N						
	黒ブレードシルク		DH68 4-0BS	DH68 3-0BS						
	黒ナイロンブレード		DH68 4-0N2	DH68 3-0N2						

入数 1箱(10本入)

		丸直針				
	針コード・長さ	糸の色と種類	3-0	2-0	1-0	糸長さ
OH20S 20mm	黒ナイロン	DH20S 3-0N			50cm	
		黒ブレードシルク	DH20S 3-0BS			500111
AS60 60mm		黒ナイロン		AS60 2-0N		60cm
AS60W 60mm		黒ナイロン		AS60W 2-0N	AS60W 1-0N	OUCIII

入数 1箱(10本入)

- 般的名称:ポリアミド縫合糸(38847000)

販 売 名:針付ナイロン

医療機器承認番号:20200BZZ01575000

高度管理医療機器 · 再使用禁止

一 般 的 名 称:ポリアミド縫合糸(38847000)

販売 名:針付ナイロンブレード 医療機器承認番号:20100BZZ01802000

高度管理医療機器·再使用禁止

- 般 的 名 称:滅菌済み絹製縫合糸(13910000)

販売 名:針付ブレードシルク 医療機器承認番号:20200BZZ01576000

高度管理医療機器·再使用禁止

# エムソーブ® | M-SORB

Braided Polyglycolic Acid Suture



## 滅菌済 エムソーブ

PGA(ポリグリコール酸)を原材料とした編糸縫合糸であり、生体内で加水分解し、 2週間で強度が半減、約15週間で分解吸収されます。

角針弱弯									
針コード・長さ	糸の種類	5-0	4-0	3-0	糸長さ				
₩ P13 13mm	紫エムソーブ	P135R							
	白エムソーブ	P135RS							
₩ P15 15mm	紫エムソーブ	P155R	P154R						
	白エムソーブ	P155RS	P154RS		45 0 000				
₩ P17 17mm	紫エムソーブ		P174R		45cm				
	白エムソーブ		P174RS						
₩ P19 19mm	紫エムソーブ			P193R					
	白エムソーブ			P193RS					
₩ K21 21mm	紫エムソーブ			K213R					
	白エムソーブ			K213RS	70cm				
₩ K25 25mm	紫エムソーブ			K253R	700111				
	白エムソーブ			K253RS					

角針強弯							
針コード・長さ	糸の種類	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	糸長さ
☑ P61 11mm	紫エムソーブ	P616R	P615R				
$\overline{}$	白エムソーブ	P616RS	P615RS				
₩ P63 13mm	紫エムソーブ	P636R	P635R	P634R			
	白エムソーブ	P636RS	P635RS	P634RS			45
☑ P65 15mm	紫エムソーブ		P655R	P654R			45cm
	白エムソーブ		P655RS	P654RS			
₩ P67 17mm	紫エムソーブ			P674R	P673R		
	白エムソーブ			P674RS	P673RS		
₩ K71 21mm	紫エムソーブ			K714R	K713R		
	白エムソーブ			K714RS	K713RS		70cm
▼ K75 25mm	紫エムソーブ				K753R	K752R	/ OCIII
	白エムソーブ				K753RS	K752RS	

入数 1箱(12本入)

丸針弱弯								
針コード・長さ	糸の種類	5-0	4-0	3-0	糸長さ			
⊙ M12 12mm	紫エムソーブ	M125R						
	白エムソーブ	M125RS						
⊙ M17 17mm	紫エムソーブ		M174R		70			
	白エムソーブ		M174RS		70cm			
⊙ M20 20mm	紫エムソーブ			M203R				
	白エムソーブ			M203RS				

丸針強弯									
針コード・長さ	糸の種類	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	糸長さ
⊙ M61 11mm	紫エムソーブ	M616R							- 45cm
$\bigcup$	白エムソーブ	M616RS							
⊙ <sub>M63 13mm</sub>	紫エムソーブ		M635R						
	白エムソーブ		M635RS						
○ M65 15mm	紫エムソーブ		M655R	M654R					
	白エムソーブ		M655RS	M654RS					
⊙ <sub>M68 18mm</sub>	紫エムソーブ			M684R	M683R				
	白エムソーブ			M684RS	M683RS				
⊙ <sub>M71 21mm</sub>	紫エムソーブ				M713R				70cm
	白エムソーブ				M713RS				
⊙ <sub>M73 23mm</sub>	紫エムソーブ				M733R				
	白エムソーブ				M733RS				
⊙ <sub>M78 28mm</sub>	紫エムソーブ					M782R			
	白エムソーブ					M782RS			
⊙ M83 33mm	紫エムソーブ						M831R		
⊙ M86 36mm	紫エムソーブ							M8601R	

入数 1箱(12本入)

一般的名称:ポリグリコール酸縫合糸(13908000)

販 売 名:エムソーブ

医療機器承認番号:20700BZZ00566000

高度管理医療機器·再使用禁止

## 縫合糸の規格 | Suture Standard

非吸収性縫合糸基準(薬生発1224 第4号 平成27年)							
公称号数、直径、引張り強さ、引き抜き強さ							
公称号数	メトリックサイズ	直径	引張り強さ**1	針付引き抜き強さ(単位 N)			
公孙亏奴	71999917	(単位mm)	(単位 N)	平均值	各測定値		
12-0	0.01	0.001~0.009	0.01 <sup>**2</sup>	-	-		
11-0	0.1	0.010~0.019	0.06 <sup>**2</sup>	0.07	0.05		
10-0	0.2	0.020~0.029	0.19 <sup>**2</sup>	0.14	0.10		
9-0	0.3	0.030~0.039	0.42 <sup>**2</sup>	0.21	0.15		
8-0	0.4	0.040~0.049	0.59	0.49	0.25		
7-0	0.5	0.050~0.069	1.08	0.78	0.39		
6-0	0.7	0.070~0.099	1.96	1.67	0.78		
5-0	1	0.10~0.149	3.92	2.25	1.08		
4-0	1.5	0.15~0.199	5.88	4.41	2.25		
3-0	2	0.20~0.269	9.41	6.66	3.33		
2-0	3	0.27~0.349	14.1	10.8	4.41		
0	3.5	0.35~0.399	21.2	14.7	4.41		
1	4	0.40~0.499	26.7	17.6	5.88		
2	5	0.50~0.599	34.5	17.6	6.86		
3 and 4	6	0.60~0.699	47.8	17.6	6.86		
5	7	0.70~0.799	60.4	17.6	6.86		
6	8	0.80~0.899	71.3	17.6	6.86		
7	9	0.90~0.999	88.6	17.6	6.86		
8	10	1.00~1.099	88.6	17.6	6.86		
9	11	1.10~1.199	88.6	17.6	6.86		

<sup>※1</sup> 引張り強さの最小許容値は、滅菌済み縫合糸に適用される。未滅菌縫合糸の最小許容値はこれより25%高い。

 $1.20 \sim 1.299$ 

17.6

6.86

12

吸収性合成縫合糸基準(USP41版)						
LICD C:	メトリックサイズ (Gauge No.)	直径(単	位 mm)	結紮抗張力	結紮抗張力 (単位 N)	
USP Size		最小	最大	(単位 kgf)		
12-0	0.01	0.001	0.009	-	-	
11-0	0.1	0.010	0.019	-	-	
10-0	0.2	0.020	0.029	0.025*	0.24*	
9-0	0.3	0.030	0.039	0.050*	0.49*	
8-0	0.4	0.040	0.049	0.07	0.69	
7-0	0.5	0.050	0.069	0.14	1.37	
6-0	0.7	0.070	0.099	0.25	2.45	
5-0	1	0.10	0.149	0.68	6.67	
4-0	1.5	0.15	0.199	0.95	9.32	
3-0	2	0.20	0.249	1.77	17.4	
2-0	3	0.30	0.339	2.68	26.3	
0	3.5	0.35	0.399	3.90	38.2	
1	4	0.40	0.499	5.08	49.8	
2	5	0.50	0.599	6.35	62.3	
3 and 4	6	0.60	0.699	7.29	71.5	
5	7	0.70	0.799	-	-	

<sup>\*</sup> USP9-0及び10-0の抗張力は結紮をしない状態で測定したものです。

弊社では号数について0を1-0と表記しております。

<sup>※2</sup> 号数9-0以下の細い縫合糸の引張り強さの測定に際しては、結び目を作らずそのまま測定を行う。

#### 医療用縫合針·針付各種縫合糸·縫合糸

# Matsuda松田医科工業株式会社



弊社は、心臓血管領域・外科領域をはじめ独自の製品・技術・サービスにより 医療従事者とパートナーが求める医療機器・材料の絶え間ない改良に共に取り組み、 急性期治療における専門性の高い医療をサポートします。

#### 所在地

本 社 ●〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目13番4号 TEL(03)3814-8911(代) FAX(03)3814-8910

大阪営業所 ●〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-12-1-103 TEL(06)6330-1256 FAX(06)6330-1257

九州営業所 ●〒803-8018 福岡県北九州市小倉北区竪町2-5-9 TEL(093)561-1666 FAX(093)571-0554

札幌営業所 ●〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条3丁目7-31 黒田ビルTEL(011)816-1851 FAX(011)816-1852

