

ダイカスーパー縫合針

Surgical Needle (Daica Super)




“ダイカ” スーパー縫合針セット

◎ご指定通りの針組み合わせ（種類・本数）にて作製いたします。

◎基板（台紙）に「針種類・サイズ」「医療機関名」「セット名称（手術名称）」等記載いたします。

樹脂（ポリプロピレン）製基板（台紙）の採用により、安定した針の取り出しができます。

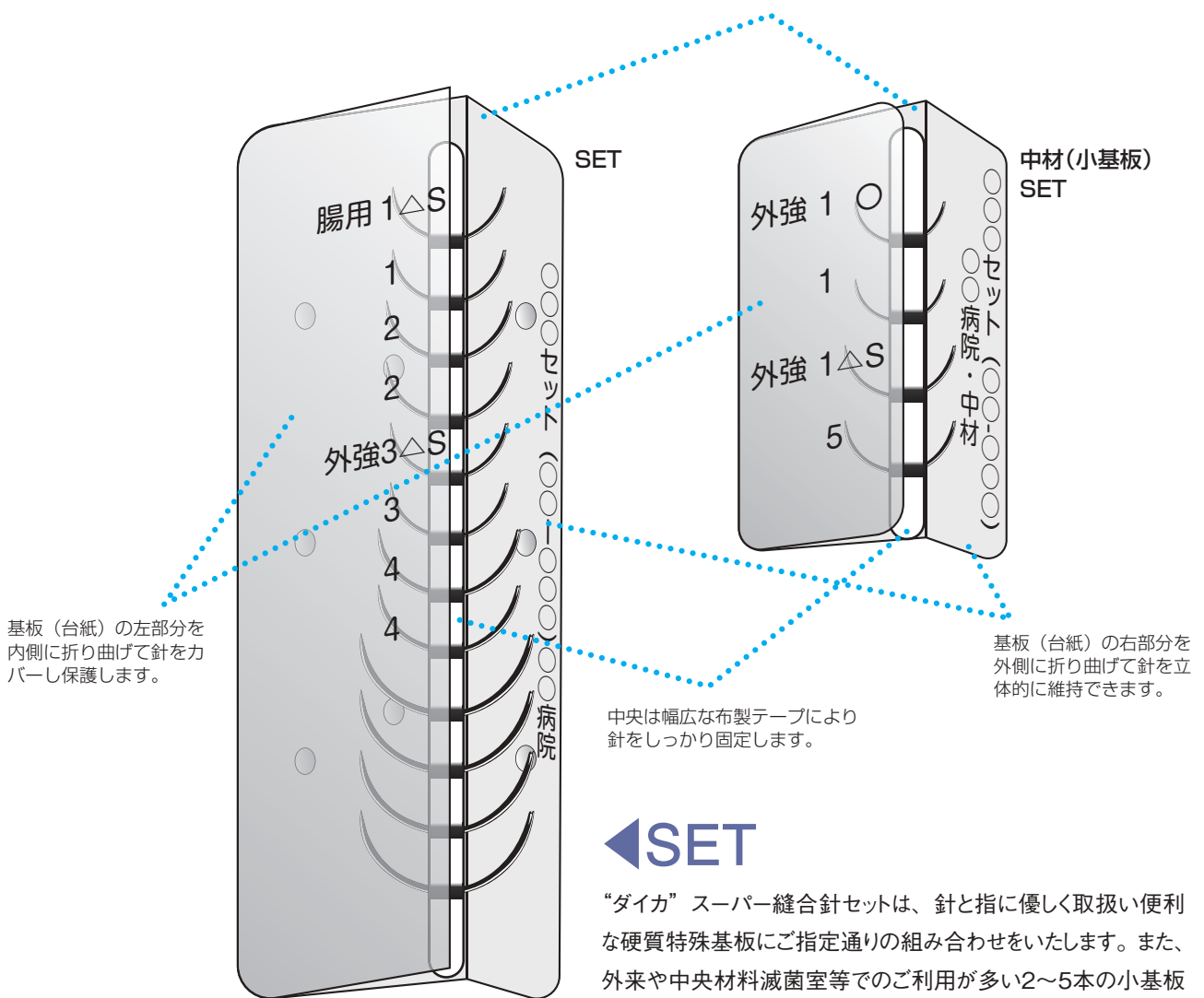

省力化の推進に“ダイカ”のユニークな製品を!!
品質・価格・便利さ・使い易さを兼ね備えた
滅菌バッグ入り組み合わせ縫合針。

“ダイカ”スーパー縫合針セットの特長



Fig.1



Fig.2

- 医療機関からのご要望に応じた縫合針をセットし、病院別・手術別に作製します。
 - “ダイカ”スーパー縫合針の様々なサイズや本数を組み合わせて包装いたします。
 - 硬質な樹脂製の基板を採用致しました。
 - Fig.1のように基板を片手に保持することで、中央部から縫合針の針元部分を浮き上がらせることができます。
 - 基板の左側を折り曲げて製品をカバーすることで、使用中及び輸送中や保管中の針先等を保護いたします。
 - 基板に「縫合針の種類やサイズ」「医療機関名」「手術の名称」を記載いたします。
 - セットする縫合針の本数等により、10セット入／箱や50セット入／箱となります。(Fig.2)
 - 用途に合わせて、滅菌済又は未滅菌の選択ができます。
- ※未滅菌製品はご使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。

各手術（Dr.）対応の組み合わせ内容ご指定による臨床サンプルの製造は、可能です。

“ダイカ”スーパー縫合針

“ダイカ”スーパー縫合針の特長



Fig. 3

- 針先研磨・孔部加工により、刺通性能・曲げ強度を第一に考えた縫合針です
- 使用目的に合わせた、豊富なバリエーションが揃っています
- 孔の種類はバネ（弾機）孔とナミ（普通）孔の2種類で、用途に応じて選択できます（※）
- 10本入/1袋と12袋入/1箱の販売形態です（Fig. 3）

※

バネ（弾機）孔 孔部コード：D



もっともよく使われているタイプです。糸を通すのが簡単で手順がスムーズに行われます。


ナミ（普通）孔 孔部コード：F



普通の裁縫針と同じように糸先を整えて孔に糸を通す技術を要します。糸が切れたり抜けたりすることはなく組織を傷つけることもありません。

“ダイカ”スーパーSPタイプ縫合針


◎同じ種類の針を1本ずつ・2本ずつ・3本ずつ滅菌バッグに個包装した製品です。

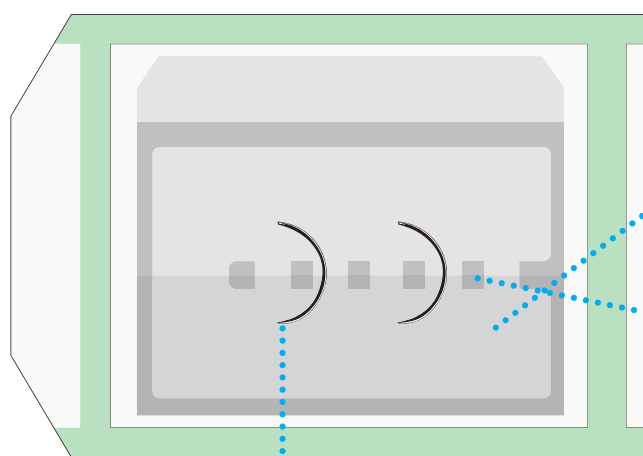

針先側は二重フィルム構造になっており、縫合針先端部と扱い者の指先の保護に役立ちます。又、使用時に針の抜け落ちを予防します。（注1）

シールドにより、滅菌紙とフィルムで針を固定します。

フィルムは、剥離すると中央部でいったん止まります。針を持針器で把持する糸孔側のみ突出し、針が取り出し易くなります。

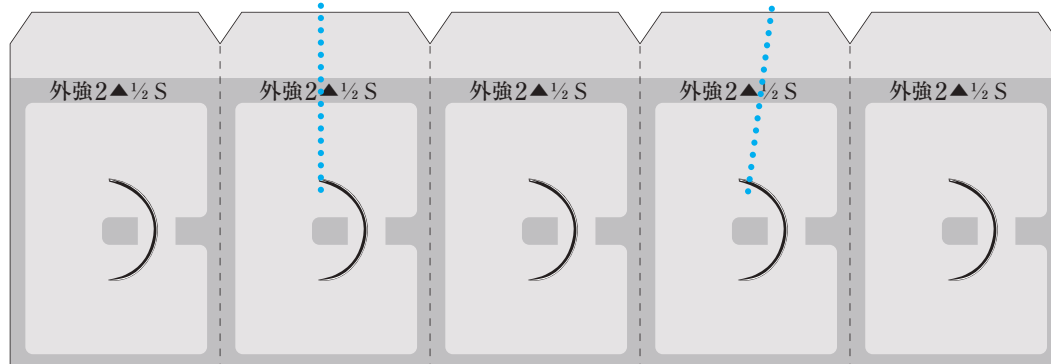

（注1）“二重フィルム”は2本ずつ・3本ずつの個包装製品に装填されます。1本ずつの個包装製品は一重フィルムとなります。

“ダイカ” スーパー SP タイプ縫合針の特長



Fig.5

Fig.4


- 同一種類の針を1本ずつ、2本ずつ、3本ずつ個包装した製品です。
- 必要な本数のみご使用可能です。
- 1包ごとに製品表示されています。
- 1本個包装タイプ（SP-1）は、5包装が連続シート状になっています。ご使用時に切り離してご使用ください。
- 100個包装入り1箱（Fig.4）です。
- ご使用の際は、（Fig.5）のように開封して、持針器で取り出してください。
- 2本ずつ個包装・3本ずつ個包装の製品は縫合針の先端部分を二重のフィルムで保護しています。

“ダイカ”スーパー SPタイプ縫合針




◀ SP-1

SP-1 タイプは1本ずつ一重包装されており、1 シート 5 包装で切り離し可能なミシン目入り連続シート状です。（Fig4）
組み合わせ縫合針セットの補充用として適しています。

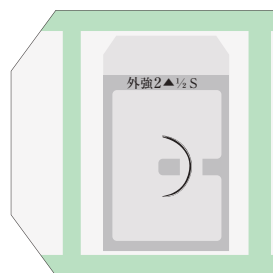


◀ SPW-1

SPW-1 は滅菌バッグが二重包装で、針は 1 本入りです。

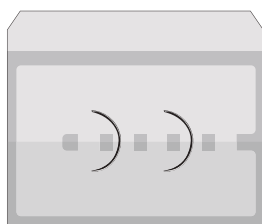


◀ SP-2

SP-2 タイプは 2 本ずつ一重包装されています。

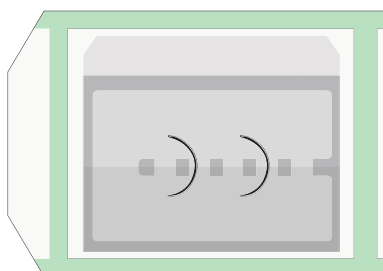


◀ SPW-2

SPW-2 は滅菌バッグが二重包装で、同一種類の針が 2 本入りです。

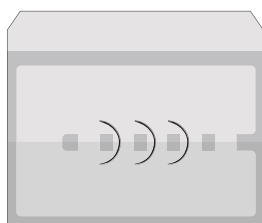

◀ SP-3

SP-3 タイプは 3 本ずつ一重包装されています。

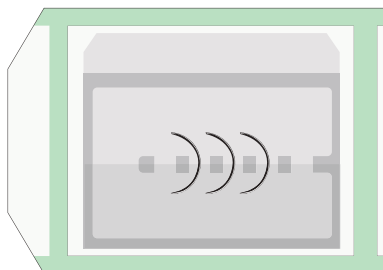


◀ SPW-3

SPW-3 は滅菌バッグが二重包装で、同一種類の針が 3 本入りです。

※“ダイカ” スーパー SP タイプ縫合針は、すべて滅菌バッグ包装になっておりますので、そのままオートクレーブあるいは、E.O.G で滅菌処理の上ご使用ください。
※ご希望により滅菌済（E.O.G）にての納品もお受けいたします。

■ ダイカスーパー縫合針（原寸図）


1 外科用強弯角針 Surgical Suture Needle 1/2 circle Standard cutting edge

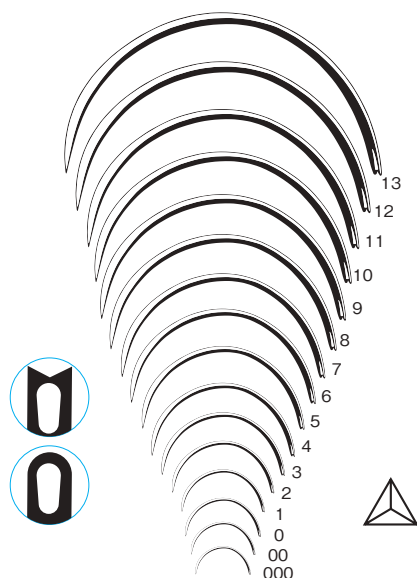

外科用強弯 角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
000	0.50	11	7.0	6	0.95	37	23.6
00	0.50	13	8.3	7	1.05	41	26.0
0	0.60	15	9.5	8	1.15	45.5	29.0
1	0.60	17	10.8	9	1.15	49	31.2
2	0.70	21	13.3	10	1.25	52	33.0
3	0.75	25	15.9	11	1.35	56	35.7
4	0.85	29	18.5	12	1.35	61	38.9
5	0.85	33	21.0	13	1.35	65	41.4


2 外科用強弯丸針 Surgical Suture Needle 1/2 circle Taper Point

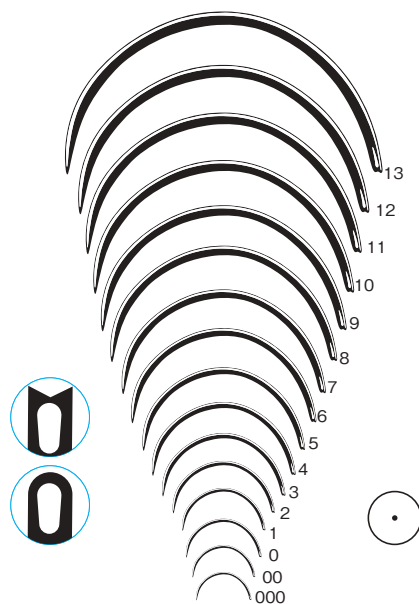

外科用強弯 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
000	0.50	11	7.0	6	0.95	37	23.6
00	0.50	13	8.3	7	1.05	41	26.0
0	0.60	15	9.5	8	1.15	45.5	29.0
1	0.60	17	10.8	9	1.15	49	31.2
2	0.70	21	13.3	10	1.25	52	33.0
3	0.75	25	15.9	11	1.35	56	35.7
4	0.85	29	18.5	12	1.35	61	38.9
5	0.85	33	21.0	13	1.35	65	41.4


3 外科用弱弯角針 Surgical Suture Needle 3/8 circle Standard cutting edge

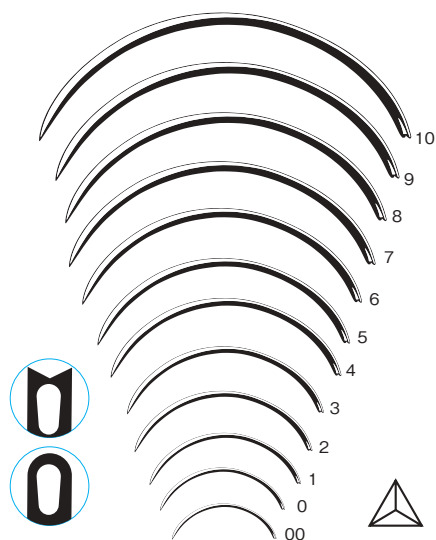

外科用弱弯 角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
00	0.60	17	13.9	5	1.05	41	33.6
0	0.70	21	17.2	6	1.15	45.5	37.3
1	0.75	25	20.5	7	1.15	49	40.0
2	0.85	29	23.7	8	1.25	52	42.6
3	0.85	33	27.0	9	1.35	56	46.0
4	0.95	37	30.3	10	1.35	61	50.0


4 外科用弱弯丸針 Surgical Suture Needle 3/8 circle Taper Point

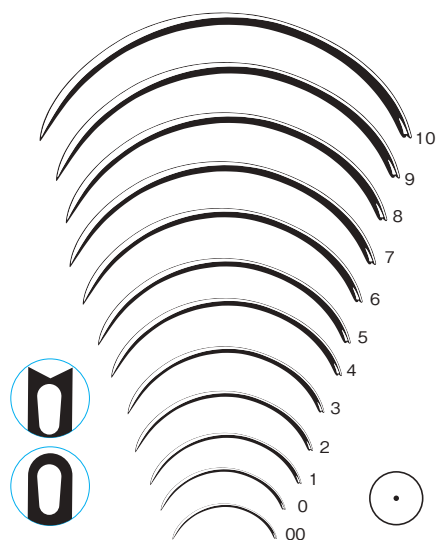

外科用弱弯 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
00	0.60	17	13.9	5	1.05	41	33.6
0	0.70	21	17.2	6	1.15	45.5	37.3
1	0.75	25	20.5	7	1.15	49	40.0
2	0.85	29	23.7	8	1.25	52	42.6
3	0.85	33	27.0	9	1.35	56	46.0
4	0.95	37	30.3	10	1.35	61	50.0


5 外科用角直針 Surgical Suture Needle Straight Standard cutting edge

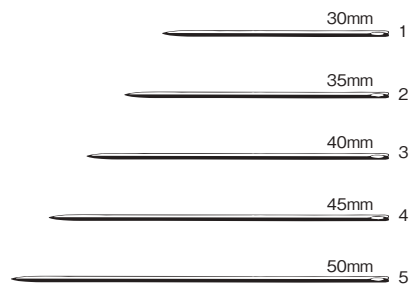

外科用 直・角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
1	0.60	30	—	4	0.70	45	—
2	0.60	35	—	5	0.70	50	—
3	0.60	40	—				


6 腸用直丸針 Intestinal Suture Needle Straight Taper Point

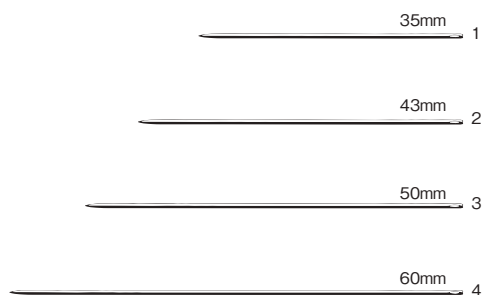

腸用 直・丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
1	0.60	35	—	3	0.60	50	—
2	0.60	43	—	4	0.70	60	—


7 腸用丸針 Intestinal Suture Needle 1/2 circle Taper Point

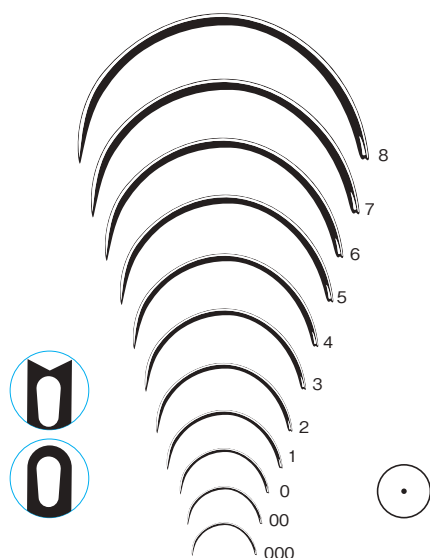

腸用 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
000	0.50	13	8.3	4	0.80	38	24.2
00	0.50	15	9.5	5	0.90	43	27.3
0	0.60	18	11.5	6	1.00	48	30.5
1	0.60	23	14.6	7	1.05	53	33.8
2	0.65	28	17.8	8	1.15	58	36.9
3	0.75	33	21.0				


8 腸用弱弯丸針 Intestinal Suture Needle 3/8 circle Taper Point

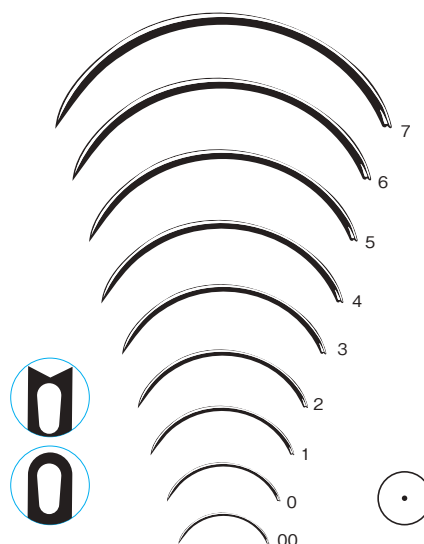

腸用弱弯 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
00	0.50	15	12.3	4	0.80	38	31.2
0	0.60	18	14.8	5	0.90	43	35.3
1	0.60	23	18.9	6	1.00	48	39.5
2	0.65	28	23.0	7	1.05	53	43.5
3	0.75	33	27.0				


9 婦人科用角針 Gynecological Suture Needle 4/9 circle Standard cutting edge

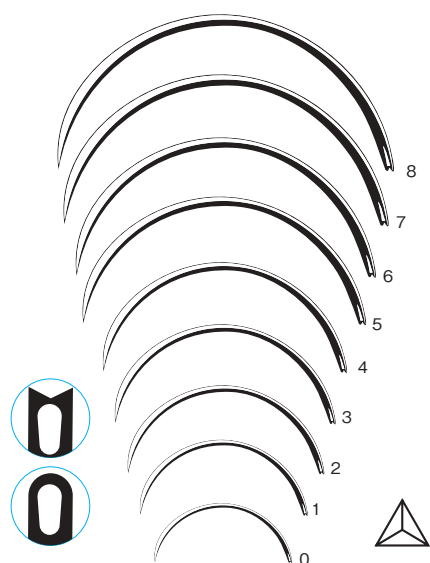

婦人科用 角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
0	0.95	26	18.2	5	1.25	52	36.4
1	1.05	31	21.7	6	1.35	56	39.2
2	1.05	36	25.2	7	1.35	61	42.7
3	1.05	41	28.7	8	1.35	65	45.5
4	1.15	45.5	31.9				


10 婦人科用丸針 Gynecological Suture Needle 4/9 circle Taper Point

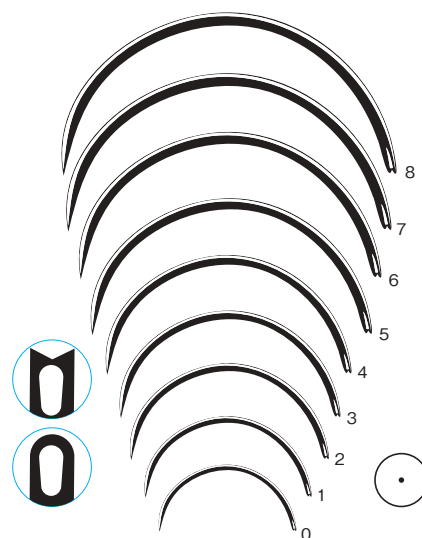

婦人科用 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
0	0.95	26	18.2	5	1.25	52	36.4
1	1.05	31	21.7	6	1.35	56	39.2
2	1.05	36	25.2	7	1.35	61	42.7
3	1.05	41	28.7	8	1.35	65	45.5
4	1.15	45.5	31.9				


11 婦人科用鈍針 Gynecological Suture Needle 4/9 circle Taper Point (dull)

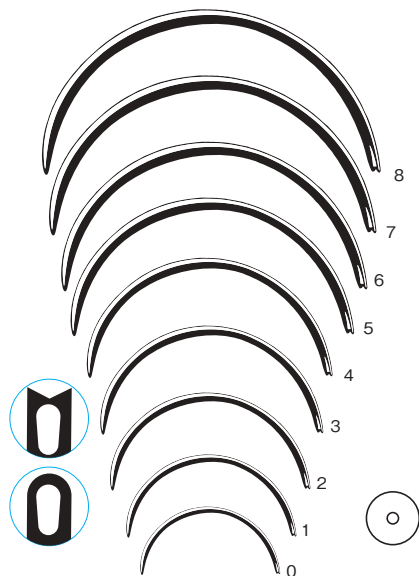

婦人科用 鈍

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
0	0.95	26	18.2	5	1.25	52	36.4
1	1.05	31	21.7	6	1.35	56	39.2
2	1.05	36	25.2	7	1.35	61	42.7
3	1.05	41	28.7	8	1.35	65	45.5
4	1.15	45.5	31.9				


12 血管用強弯丸針 Blood vessel Suture Needle 1/2 circle Taper Point

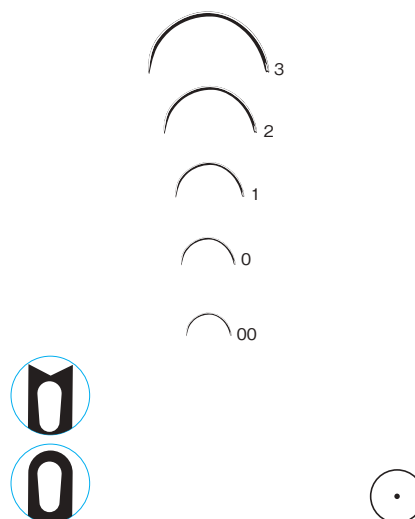

血管用強弯 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
00	0.40	9	5.7	2	0.40	19	12.0
0	0.40	11	7.0	3	0.40	24	15.3
1	0.40	14	8.9				


13 眼科用角針 Ophthalmic Suture Needle 3/8 circle Reverse cutting edge

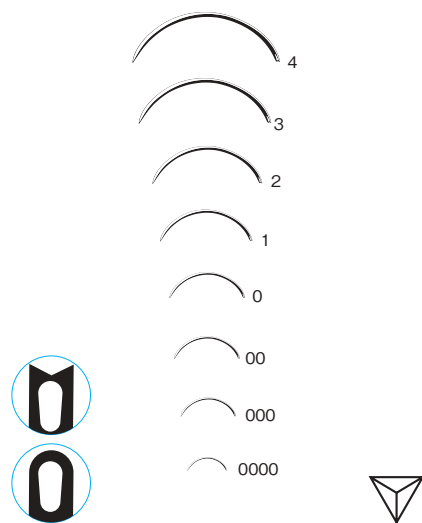

眼科用 角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
0000	0.40	7	5.7	1	0.60	15	12.3
000	0.50	9	7.4	2	0.60	18	14.8
00	0.50	11	9.0	3	0.60	21	17.2
0	0.50	13	10.7	4	0.60	24	19.7


14 眼科用丸針 Ophthalmic Suture Needle 3/8 circle Taper point

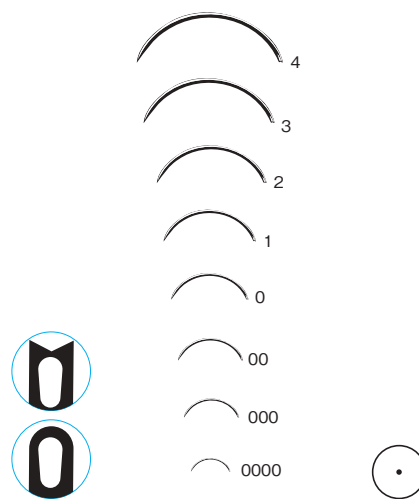

眼科用 丸

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
0000	0.40	7	5.7	1	0.60	15	12.3
000	0.50	9	7.4	2	0.60	18	14.8
00	0.50	11	9.0	3	0.60	21	17.2
0	0.50	13	10.7	4	0.60	24	19.7


15 形成用強弯角針 Orthopedics Suture Needle 1/2 circle Reverse cutting edge

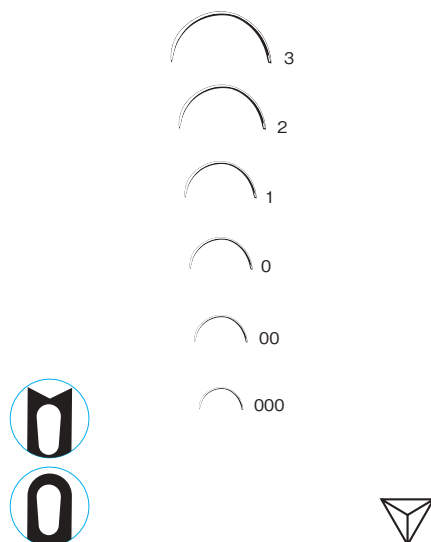

形成用強弯 角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
000	0.50	9	5.8	1	0.60	15	9.5
00	0.50	11	7.0	2	0.60	18	11.5
0	0.50	13	8.3	3	0.60	21	13.3

16 形成用弱弯角針 Orthopedics Suture Needle 3/8 circle Reverse cutting edge

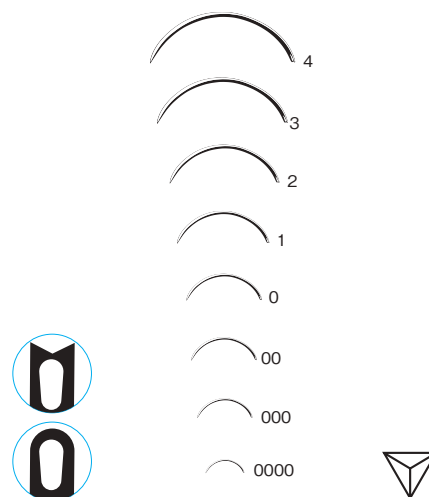

形成用弱弯 角

サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径	サイズ (SIZE)	針径 (φ)	全長 (L)	円弧直径
0000	0.40	7	5.7	1	0.60	15	12.3
000	0.50	9	7.4	2	0.60	18	14.8
00	0.50	11	9.0	3	0.60	21	17.2
0	0.50	13	10.7	4	0.60	24	19.7

一 般 的 名 称：単回使用縫合針（70417002）
販 売 名：未滅菌縫合針
医療機器承認番号：22000BZX01674000
管 理 医 療 機 器・再使用禁止
製 造 販 売 元：松田医科工業株式会社

一 般 的 名 称：単回使用縫合針（70417002）
販 売 名：滅菌済縫合針セット
医療機器承認番号：22000BZX01676000
管 理 医 療 機 器・再使用禁止
製 造 販 売 元：松田医科工業株式会社